


ORIENTAÇÕES PARA USUÁRIOS DE CPAP RESMED

GRUPO
micro
som
BELO HORIZONTE



ResMed

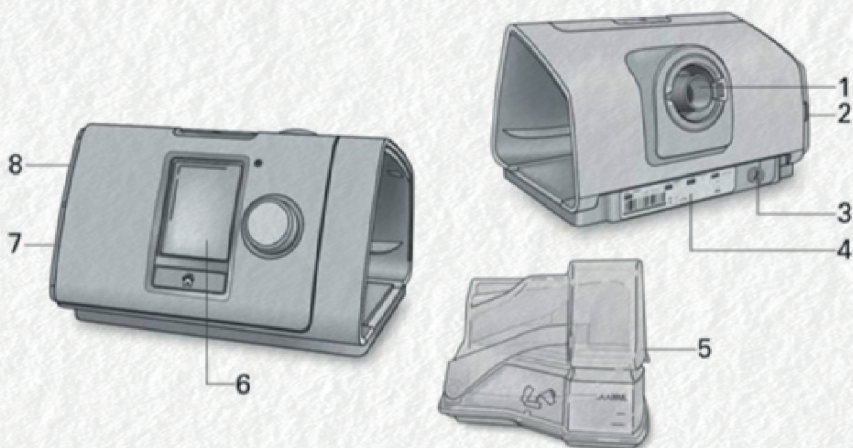

SOBRE O CPAP RESMED

1// SAÍDA DE AR

2// TAMPA DO FILTRO DE AR

3// ENTRADA DE ENERGIA

4// NÚMERO DE SÉRIE E NÚMERO DO
DISPOSITIVO

5// CÂMARA DE ÁGUA

6// TELA

7// TAMPA DO ADAPTADOR

8// TAMPA DO CARTÃO SD

ORIENTAÇÕES PARA
**USUÁRIOS
DE CPAP
RESMED**

GRUPO
**micro
som**
BELO HORIZONTE



SOBRE O PAINEL DE CONTROLE



BOTÃO INÍCIO PARA
VOLTAR À TELA INICIAL
A QUALQUER MOMENTO

BOTÃO INICIAR/PARAR
O FLUXO DE AR

BOTÃO GIRATÓRIO
PARA NAVEGAR E
ALTERAR AS OPÇÕES

SAÍDA DE AR PARA
CONECTAR A TRAQUEIA

CÂMARA DE ÁGUA
PARA UMIDIFICAÇÃO

ORIENTAÇÕES PARA USUÁRIOS DE CPAP RESMED

GRUPO
micro
som
BELO HORIZONTE

ResMed

COMO MANUSEAR O CPAP RESMED



Coloque o CPAP em uma superfície plana estável.



Conecte A FONTE de energia na parte posterior do CPAP e a outra extremidade à tomada de energia.




Conecte a TRAQUEIA firmemente à saída de ar, localizada na parte posterior do CPAP.



Abra a câmara de água e encha-a até a marca de nível máximo de água filtrada ou destilada.



Feche a câmara de água e insira-a na lateral do CPAP.

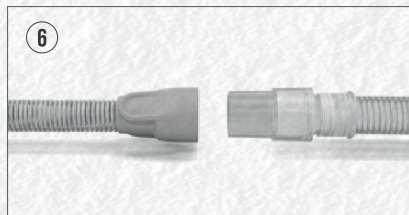


Conecte firmemente a traqueia à máscara montada.

ORIENTAÇÕES PARA USUÁRIOS DE CPAP RESMED



COMO INICIAR A TERAPIA

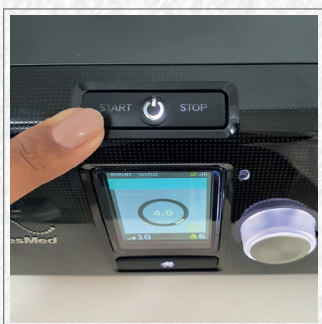

1. Ajuste sua máscara.
2. Pressione uma única vez a tecla "START" para ligar o fluxo de ar e respire normalmente.
3. Você saberá que a terapia está ligada quando a pressão de tratamento é mostrada em verde na tela inicial.

4. A tela ficará preta automaticamente após um curto período de tempo.

COMO PARAR A TERAPIA



1. Pressione uma única vez a tecla "STOP" para para o fluxo de ar.
2. Remova sua máscara.
3. Após alguns segundos o resumo do relatório da noite anterior será mostrado na tela inicial.

4. Para permitir que você transmita os dados ao profissional de saúde, você deve retirar o dispositivo da tomada somente após 20 minutos.

COMO AJUSTAR O NÍVEL DE UMIDADE

Se seu nariz ou boca estiver ficando seco, aumente a umidade. Se você estiver percebendo GOTÍCULAS DE ÁGUA em sua máscara, diminua a umidade.



1. Em minhas opções, gire o botão giratório para destacar Umidade e então pressione o botão giratório.

2. Gire o botão giratório para ajustar o nível de umidade e pressione o botão giratório para armazenar a mudança.

COMO AJUSTAR A MÁSCARA

O Ajuste Máscara foi projetado para ajudar você a avaliar e identificar possíveis vazamento de ar ao redor da máscara.



Para verificar o Ajuste da máscara:

1. Na tela principal em Minhas opções, gire o botão giratório para clicar em "ajustar máscara" e então pressione o botão giratório.
2. O CPAP irá começar a ventilar ar. Nesse momento ajuste a máscara no rosto, o silicone da máscara e as tiras até obter um bom resultado conforme a tela acima.
3. Para interromper o "Ajuste Másc", pressione o botão giratório. Se você não conseguir obter boa vedação de máscara, fale com o profissional que cuida da sua saúde.

APARELHOS AUDITIVOS E CPAP

MICROSOM BH: OUÇA MELHOR, VIVA MELHOR.



Lembre-se de Sempre retornar na clínica para revisões e regulagens. A manutenção é imprescindível para prolongar a vida útil do seu CPAP.

UNIDADE SANTA EFIGÊNIA

55 31 3222-5157 | 31 3274-2093 | 9 8479-6922

RUA DOS OTONI, 881, SALA 501- 505

BELO HORIZONTE - MG | CEP.: 30150-270

UNIDADE PRADO

55 31 2127-3227 | 31 2127-3229 | 9 8452-6102

AV. DO CONTORNO, 9153, LOJA 1

BELO HORIZONTE - MG | CEP.: 30110-062

UNIDADE BETIM

55 31 3511-5649 | 3511-8753 | 9 8286-9832

AV. GOVERNADOR VALADARES, 444, LOJA 03

BETIM - MG | CEP.: 32600-216